


金銀パラジウム合金

キンバラG12

歯科鑄造用金銀パラジウム合金 管理医療機器 (クラスII) 認証番号:225ALBZX00001000
販売名:イシフク キンバラG12

さまざまな保険適用症例に使用でき、
ワンランク上の特性を備えた金銀パラジウム合金

- JIS 種別: 第1種、第2種兼用
- 用途: インレー、クラウン、ブリッジ、クラスプ、バー、ポスト
- 液相点: 960℃
- 硬さ: 軟化155HV
硬化305HV
- 質量: 30g
- 熱処理方法: 軟化処理/750℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化処理後400℃で20分保持した後、大気放冷

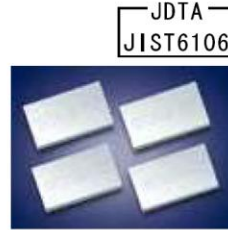

金銀パラジウム合金ろう材

キンバラロウ

歯科用金銀パラジウム合金ろう 管理医療機器 (クラスII) 認証番号:220ALBZX00021000
販売名:イシフクキンバラロウ

各種金銀パラジウム合金に適應するろう材

- 用途: 金銀パラジウム合金ろう付
- 液相点: 820℃
- 形状: 板状
- 質量: 5g



パラロウ25

歯科用金銀パラジウム合金ろう 管理医療機器 (クラスII) 認証番号:220ALBZX00022000
販売名:イシフク パラロウ25

流ろう性と操作性に優れたろう材

- 用途: 金銀パラジウム合金ろう付
- 液相点: 785℃
- 形状: リボン状
- 質量: 5g



銀ろう材

デントソルダー

歯科用銀ろう 管理医療機器 (クラスII) 認証番号:15200BZZ00676000
販売名:イシフクデントソルダー

操作性に優れた銀ろう

- 用途: 18-8鋼、ステンレス鋼、ニッケルクロム、コバルトクロムろう付
- 液相点: 665℃
- 質量: 10g

